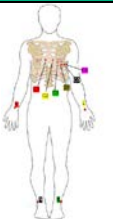

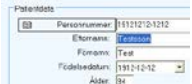
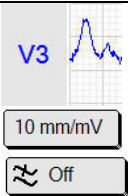





Guide de démarrage rapide

Ce guide de démarrage rapide fournit une brève explication sur la manière d'utiliser EC Sense pour l'ECG de repos. L'utilisateur peut se reporter à ce guide de démarrage rapide qui contient une description récapitulative pour enregistrer un ECG.

Icône	Touche	Instruction
		1. Préparer le patient et connecter toutes les électrodes selon l'emplacement souhaité de l'électrode de dérivation. Vérifier que le câble patient est relié à l'unité d'acquisition.
	F2	2. Cliquer sur l'icône pour entrer les données patient.
		3. Entrer les informations patient dans la boîte de dialogue. Si le PC est connecté à un système central de stockage, les informations seront remplies automatiquement.
		4. Sélectionner les dérivations souhaitées, le gain et les réglages du filtre. Vérifier la qualité des signaux d'ECG.
	F3	5. Démarrer une séquence automatique, par ex. AUTO 1.
La qualité est bonne?		6. Vérifier que la qualité de l'ECG analysé est OK.
	F4	7. Imprimer le résultat si souhaité (si une imprimante est connectée et si l'impression n'est pas effectuée automatiquement dans la séquence AUTO).
	F5	8. Visualiser et enregistrer l'ECG analysé sur le PC local ou dans un système central de stockage. Ceci pourrait être inclus dans la séquence automatique.
		9. Déconnecter le patient.




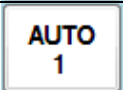
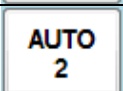







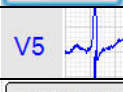

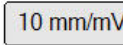


L'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation dans son intégralité.

CARDIOLEX

Vretenvägen 6
SE-171 54 Solna
Suède








Commandes ECG

Le tableau ci-dessous présente les commandes disponibles pour l'ECG de repos.

Fonction	Icône	Point de menu	Touche Fn	Commentaire
Entrer les données patient		<i>Fichier → Info patient</i>	F2	
Séquence automatique 1		<i>Fichier → Auto 1</i>	F3	
Séquence automatique 2		<i>Fichier → Auto 2</i>	F4	
Imprimer ECG temps réel		<i>Fichier → Impression manuelle</i>	F5	
Imprimer ECG de rythme		<i>Fichier → Impression rythme</i>	F6	
Arrêter l'impression		<i>Fichier → Impression manuelle/Impression de rythme</i>	F5, F6	Le bouton est actif si une impression a été lancée
Examens		<i>Fichier → Examens</i>	F7	
Réglage		<i>Fichier → Réglage</i>	Ctrl+Shift+Up	Configurer le programme
Quitter ce programme		<i>Fichier → Sortie</i>		Cliquer sur X dans le coin supérieur droit
Test à l'effort		<i>Fichier → Test à l'effort</i>	F8	Bouton actif uniquement si l'option ECG d'effort est installée
Démarrer ECG long			F9	Bouton actif uniquement si l'option ECG long est installée
Arrêter ECG long			F9	
Dérivations		<i>Vue → Dérivations</i>		Cliquer dans la zone des dérivations
Vitesse		<i>Vue → Vitesse</i>		
Gain		<i>Vue → Gain</i>		
Filtre myogramme		<i>Vue → Filtre myogramme</i>	Ctrl + F	
Impulsion mV		<i>Vue → Millivolt</i>	F10	
Patients		<i>Outils → Patients</i>		

Commandes du rapport ECG

Le tableau ci-dessous contient les commandes disponibles dans le mode Rapport pour l'ECG de repos.

Fonction	Icône	Point de menu	Touche Fn
Editer les informations patient		<i>Fichier → Info patient</i>	F2
Imprimer un rapport par défaut		<i>Fichier → Imprimer</i>	F4
Modifier temporairement l'impression		<i>Fichier → Imprimer...</i>	
Modifier temporairement le rapport		Effectuer un clic droit dans le rapport pour ouvrir un menu contextuel	
Imprimer la page visible à l'écran		<i>→Imprimer la page</i>	
Imprimer le rapport affiché		<i>→Imprimer la partie du rapport</i>	
Prévisualiser le rapport affiché		<i>Fichier → Aperçu avant impression</i>	Ctrl + W
Enregistrer l'examen		<i>Fichier → Enregistrer</i>	F5
Quitter et revenir au mode Temps réel		<i>Fichier → Temps réel</i>	F6
Ouvrir un examen		<i>Fichier → Examens</i>	F7
Configure the program		<i>File → Settings</i>	Ctrl+Shift+Up
Quitter ce programme		<i>Fichier → Sortie</i>	